


**Touch Color LCD Overhead Stirrer only, LKlab®**  
**고성능 오버헤드 스테러, Speed & Torque Display**

Cat. No.	Model	Capacity	RPM	EA Price ₩
S04-02-300	OSH-10	25L	100 - 2000	1,100,000
S04-02-305	OSH-20	40L	80 - 1200	1,250,000
S04-02-310	OSH-30	60L	50 - 800	1,400,000

- 고사양 컨트롤러
  - 정확한 RPM 제어가 가능한 Digital Feedback Controller
  - RPM 설정이 편리한 조그 다이얼 스위치
  - 터치 패널을 적용하여 조작이 직관적이고 기기의 다양한 정보를 편리하게 확인 가능
- 실시간 토크 표시
- 점도 측정 기능 - 전용 임펠라(SR-S070)를 사용하여 현재의 점도 측정
- 목표 점도 설정 기능 - 목표 점도에 도달 후 자동으로 구동 정지
  - 전용 임펠라(SR-S070)를 사용해야만 함
- Slow Start / Stop 기능이 적용되어 시료가 튀는 것을 방지
- 크롬 코팅 Chuck을 적용하여 장시간 사용에도 녹슬지 않음
- 관통형 Shaft를 적용하여 Impeller 높이 조절이 용이하고 흔들림이 적음
- 슬림하고 컴팩트한 디자인으로 공간 활용성이 좋음
- 모터 과열 방지 장치 적용
- 다양한 Stand와 Impeller 구성으로 사용이 편리
- 스터러용 임펠러, 교반실, 클램프 및 스탠드는 별도 구매
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- LK LabKorea

**Optional Accessory**

Cat. No.	Model	Blade Size	EA Price ₩
S09-03-140	SR-S070	Impeller/Propeller/φ70mm, φ8xL500 mm	27,600
C09-04-010	OSHC010	Universal Clamp	15,000
H01-05-968	R1822	Plate Stand 200 x 315 x 800 mm	98,700
S09-53-555	R1890	Plate Stand 300 x 400 x 1000 mm	133,300
S09-53-567	R3320	U-Type Stand 380 x 321 x 843 mm	75,000
S09-53-574	R3420	H-Type Stand 630 x 455 x 1275 mm	148,000

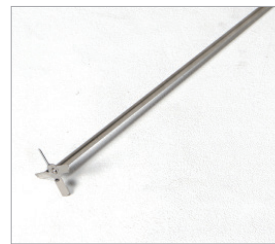

SR-S070



Universal Clamp



R3320



R3420

Cat. No.	S04-02-300	S04-02-305	S04-02-310
Model	OSH-10	OSH-20	OSH-30
Capacity(water)	25 L	40 L	60 L
Max. Viscosity	70,000 mPas	100,000 mPas	150,000 mPas
Max. Torque	120 Ncm	180 Ncm	270 Ncm
Speed range	100 ~ 2000 rpm	80 ~ 1200 rpm	50 ~ 800 rpm
Resolution		5 rpm	
Material		ABS, Aluminum	
Max. Impeller Shaft Dia.		10 mm	
Display		Touch Color LCD	
Timer		99hr 59min	
Safety		Overload & Heat Protector for Mortar	
Environmental Conditions		Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %	
Electric Supply	Power	1Phase, 220Vac, 50/60 Hz	
	Consumption	150 W	170 W