


Desktop Vibration Isolator 탁상형 제진대

배송비 별도


Cat. No.	Model	적재 중량	Size (w×d×h)	EA Price ₩
V07-258-172	VI-D4050	40 kg	400×500×100 mm	2,584,300
V07-258-180	VI-D5060	80 kg	500×600×100 mm	2,756,600
V07-258-188	VI-D8060	120 kg	800×600×100 mm	2,928,900
V07-258-196	VI-D9070	150 kg	900×700×100 mm	3,101,200

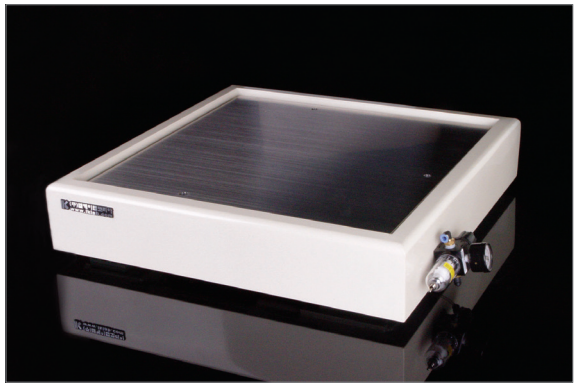

- 반도체 검사장치, 조도계, 경도계, 광학현미경 등의 정밀 측정기기
- 소형 공기 스프링을 내장하고 있는 탁상형 제진대
- 가격이 저렴하고 경량 구조로 되어 있어 설치 및 이동이 편리
- 압축공기를 공급하거나 소형 에어 컴프레서를 사용, 수동 펌프 사용가능
- 3개의 Auto Levelling Valve를 이용 자동으로 수평을 유지
- Top Plate 재질 : Steel + Stainless Steel Laminating
- 고유 진동수 : (수평) 1.5 ~ 1.8 Hz, (수직) 1.2 ~ 1.5 Hz
- 요청에 의해 크린룸용 (Stainless Steel) 및 규격외 사이즈도 공급 가능
- LK Labkorea

Vibration Isolation Table 무진동 테이블

- 특수 재질의 박막형 다이아프램을 내장한 Air Spring 채택
- Top Cover는 멜라민 상판을 사용하여 외관이 수려함
- 멜라민 상판은 특수 코팅 처리하여 파손 우려가 없음
- Workspace와 제진장치가 분리되어 진동 전달이 미미함
- 요청에 의해 좌/우 작업공간을 가진 무진동 테이블 공급가능
- 수평 조절 방식 : 3-Point Self Leveling (반복 정밀도 : ±1.2 mm)
- Air Spring 고유진동수 : (수평) 2.0 ~ 2.5 Hz, (수직) 1.2 ~ 1.5 Hz
- Load Capacity : 250 kg
- Operation : 1.5 ~ 5.0 kg/cm² 압축 공기 또는 질소 가스
- LK Labkorea

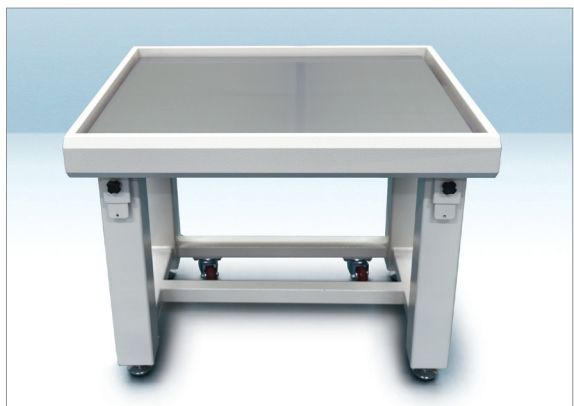


기본형

배송비 별도

Cat. No.	Model	상판 Size (w×d)	전체 Size (w×d)	EA Price ₩
V07-258-721	VI-T6060	600×600 mm	660×680 mm	4,280,000
V07-258-728	VI-T6075	600×750 mm	660×830 mm	4,460,000
V07-258-735	VI-T7560	750×600 mm	810×680 mm	4,460,000
V07-258-742	VI-T7575	750×750 mm	810×830 mm	4,520,000
V07-258-749	VI-T9060	900×600 mm	960×680 mm	4,640,000
V07-258-756	VI-T9075	900×750 mm	960×830 mm	4,713,400
V07-258-763	VI-T1260	1200×600 mm	1260×680 mm	4,786,700
V07-258-770	VI-T1275	1200×750 mm	1260×830 mm	4,951,800

• 높이 : 750 mm

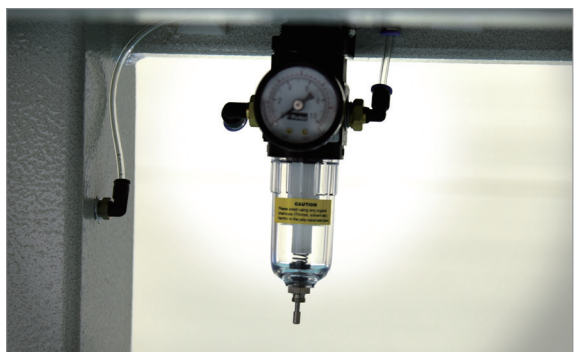

Cleanroom 용 - Stainless Steel 재질

배송비 별도

Cat. No.	Model	상판 Size (w×d)	전체 Size (w×d)	EA Price ₩
V07-258-821	VI-T6060C	600×600 mm	660×680 mm	4,786,700
V07-258-828	VI-T6075C	600×750 mm	660×830 mm	4,951,800
V07-258-835	VI-T7560C	750×600 mm	810×680 mm	4,951,800
V07-258-842	VI-T7575C	750×750 mm	810×830 mm	5,116,900
V07-258-849	VI-T9060C	900×600 mm	960×680 mm	5,116,900
V07-258-856	VI-T9075C	900×750 mm	960×830 mm	5,281,900
V07-258-863	VI-T1260C	1200×600 mm	1260×680 mm	5,480,000
V07-258-870	VI-T1275C	1200×750 mm	1260×830 mm	5,612,000

- 재질 : All Stainless Steel
- 높이 : 750 mm

