

## High Purity Teflon Acid Cycle Digestion Vessel 고순도 테프론 산순환 포집 분해 용기

- 재질 : PFA (Perfluoroalkoxy), 250°C 내열
- 불산 사용이 가능한 우수한 내화학성
- 분해용기와 포집관으로 구성
- 산 순환, 포집 사이클 반복
  - ① 가열 후 산 기체가 포집관의 ㄱ관을 거쳐 공냉 응축(포집관에 쌓임)
  - ② 산이 모두 포집관에 올라옴(반응압력 저하)
  - ③ 포집관의 액체가 반응용기로 떨어짐
- 유리 제품처럼 깨지지 않아 파손 위험이 적음 • LK Labkorea

### Vessel

Cat. No.	Model	용량	Sample Volume	EA Price ₩
C05-1995-010	LDV-001	15ml	0.2g	172,300
C05-1995-013	LDV-003	30ml	0.5g	241,200
C05-1995-016	LDV-005	60ml	2g	277,100
C05-1995-019	LDV-007	100ml	2g	289,200
C05-1995-022	LDV-009	120ml	3g	291,800
C05-1995-025	LDV-011	300ml	5g	330,100

### Hand Wrench

Cat. No.	Model	적용 Vessel	EA Price ₩
C05-1995-030	LHW-009	LDV-011	146,200

### Cap for PV-AD-60 & PV-AD-100 & PV-AD-120

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H04-1995-186	PV-CAP-47	PFA Cap Only	48,200

- 60 ml & 100 & 120 ml PFA Digestion Vessel 용
- Low Pressure Digestion용으로 사용시



## High Purity Teflon Sample Cup 고순도 테프론 샘플 컵

- 재질 : PFA (Perfluoroalkoxy), 250°C 내열
- 불산 사용이 가능한 우수한 내화학성
- LSCP-001은 반도체 분석 시 사용하는 초순수 실리콘 샘플 사용 가능
- Autosampler, 해수, 바이오샘플 등에 사용
- LK Labkorea

### Sample Cup

Cat. No.	Model	용량	Size(OD×h)	EA Price ₩
C04-1995-010	LSCP-001	1 ml	∅12×h26.5 mm	14,100
C04-1995-013	LSCP-003	1.5 ml	∅14×h24 mm	11,100
C04-1995-016	LSCP-005	2.5 ml	∅14×h36mm	12,000
C04-1995-019	LSCP-007	4.0 ml	∅14×h52 mm	16,600



### Snap Cap


Cat. No.	Model	적용 Cup	EA Price ₩
C04-1995-025	LSNCP-001	LSCP-003, LSCP-005, LSCP-007	15,700
C04-1995-028	LSNCP-003	For ∅14mm Vials	30,400

### Cover

Cat. No.	Model	적용 Cup	Description	EA Price ₩
C04-1995-030	LCR-001	LSCP-003, LSCP-005, LSCP-007	트위저용 손잡이 장착됨	17,000
C04-1995-033	LCR-003	LSCP-001	진공 트위저 사용을 위한 평면 모양 커버	15,700



LSNCP-001

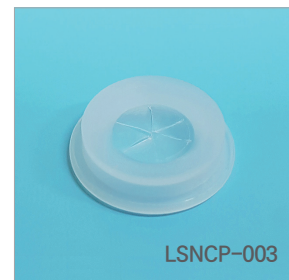

LSNCP-003



LCR-001



LCR-003