

Forced Convection Oven 강제 열풍 순환 건조기, Standard-type

배송비 별도

Cat. No.	Model	Type	Capacity	EA Price ₩
O01-02-020	LO-FS050	PID Control	60 L	1,870,000
O01-02-024	LO-FS100		100 L	2,075,100
O01-02-032	LO-FS150		150 L	2,255,500
O01-02-040	LO-FS250		250 L	2,908,600

- 열풍 순환방식으로 온도 분포도가 균일함
- 5단계 풍량 조절 기능을 통한 시료 확산 방지 (0단계 시 자연대류로 사용 가능)
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안전성 고려
- 3중 강화 유리 투시창. Door Open 없이 내부 관찰
- 가스 배출을 위한 상부 Vent Hole
- Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
- 2 가지 타입의 타이머. 구동과 동시에 시작, 목표 온도 도달 후 시작
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- RS485 PC통신 기능 제공
(통신프로그램은 엘케이랩코리아 홈페이지에서 다운로드)
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Type	EA Price ₩	
O01-96-100	SI300	Sign Tower Lamp	271,500	
B04-01-085	LI-USB	RS485 to USB Communication Cable	128,300	
O01-02-401	LO-FSSH01	Spare Wire Shelf	for 60 L	62,500
O01-02-403	LO-FSSH02		for 100 L	70,700
O01-02-405	LO-FSSH03		for 150 L	83,900
O01-02-407	LO-FSSH04		for 250 L	128,300
O01-02-411	LO-FSSH11	Optional Perforated Plate Shelf	for 60 L	144,800
O01-02-413	LO-FSSH12		for 100 L	153,000
O01-02-415	LO-FSSH13		for 150 L	161,300
O01-02-417	LO-FSSH14		for 250 L	167,800

Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
O01-91-999	VA-F0100	Validation for Oven	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음

Cat. No.		O01-02-020	O01-02-024	O01-02-032	O01-02-040
Model		LO-FS050	LO-FS100	LO-FS150	LO-FS250
Capacity		60 L	100 L	150 L	250 L
Controller	Control	PID Control, Auto-tuning			
	Display	GLCD (Graphic LCD)			
	Resolution	0.01℃			
	Timer	Run start / Wait start (99 hr 59 min)			
Fan Speed		1 ~ 5 Step			
Temperature	Range	주변온도 +10℃ to +250℃			
	Accuracy at 100℃	±0.3℃			
	Uniformity at 100℃	±1.5℃	±1.5℃	±1.7℃	±1.8℃
Size	Interior (mm)	w400×d350×h420	w480×d400×h530	w550×d460×h600	w700×d600×h600
	External (mm)	w530×d625×h745	w610×d675×h855	w680×d735×h925	w830×d875×h940
Weight		55 kg	63 kg	75 kg	90 kg
Material	Interior	Stainless Steel 304			
	Exterior	Powder Coated Steel			
Electric Supply	Power	1 Phase, 220 Vac, 50/60 Hz			
	Max Consumption	900 W (4.1 A)	1.5 kW (6.8 A)	1.8 kW (8.2 A)	2.6 kW (11.9 A)
	Power Line	Standard Plug			
Other	Wire Shelf	1ea	2ea		3ea
	Vent Hole	Ø38 mm × 2ea			
Safety		Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System			




LO-FS150



Controller

선반 장착

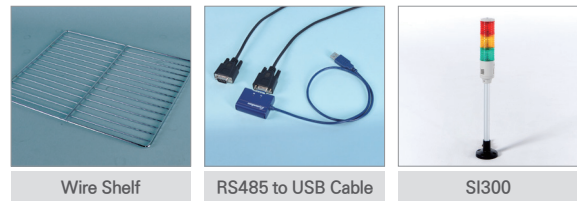

Wire Shelf

RS485 to USB Cable

SI300