

## Acid & Corrosive Flammable Safety Cabinet 산 및 부식성용 안전 캐비닛, Poly Shelf & Bottom Tray

- 부식성과 인화성을 모두 가지고 있는 물질을 보관하기 위한 방화 캐비닛임
- 내, 외부와 선반까지 모두 특수 부식방지 파우더 코팅으로 마감
- 선반은 Metal 재질이지만, Poly 재질의 트레이가 있어 적은 양의 유출물을 모으고 부식을 방지함
- 산, 부식용 캐비닛이지만, 내부에 흡이 계속해서 쌓이면  
**부식이 일어날 수 있으므로 배기와 연결하여 사용하여야 함**
- 철재 캐비닛은 질산, 황산, 염산과 같은 강산 저장용으로는 알맞지 않음 (PE 재질의 캐비닛 사용 권장)
- 모든 면이 보강 철재 이중벽 처리하여 벽 사이에 30mm의 공기층이 있도록 설계
- 무연, 고광택, Baked-on 파우더로 마감 처리
- 4개의 수평조절 다리가 장착되어 있어 수평조절 가능
- 하단에 50mm 높이의 누출 방지 틀이 있어 내용물이 외부로 흘러내리는 것을 방지
- 158kg까지 버티는 아연도금 철재 선반 장착
- 내부에 두 개의 Ø51mm 환기구 장착 (Fire Baffle과 Cap 포함)
- Key 잠금 장치가 장착되어 있는 평면 도어 개폐 손잡이
- 삼중 래칭 시스템 : 3 포인트 잠금 장치로 내부 밀폐성 증진 및 열 차단율 향상
- 내부 측면에 121mm 간격으로 선반 지지대가 있어 선반 높이 자유롭게 변경 가능
- Self-closing type 도어는 화재 발생시 온도가 75°C 정도에 도달하면 자동으로 문이 닫힘
- Manual Type의 도어는 180도, Self-closing type의 도어는 90도까지 개방 가능
- Made in USA 제품으로 모든 제품이 미국에서 직접 생산 되어짐
- 인증 : OSHA와 NFPA 규정 준수**
  - NFPA : 국제 화재 방지 협회 인증
  - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
  - 미국 FM 인증 : 화재 발생시 캐비닛 내부 온도를 163°C 이하로 약 10분간 유지
- Eagle


### One Door형

#### Manual Type

Cat. No.	Model	용량	Capacity (gal)	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
					Inner	Outer		
S01-146-101	CRA-1904X	15 L	4	1	349×349×445	432×432×559	N.O	1,502,400
S01-146-105	CRA-1923X	90 L	24	3	508×370×1537	591×457×1651	N.O,FM	3,120,800

배송비 별도

CRA-47X

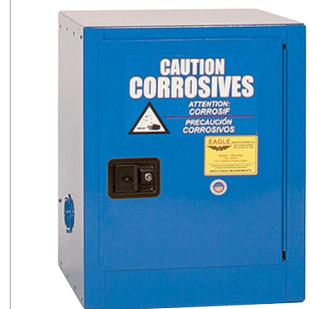

CRA-1903X

#### Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	Capacity (gal)	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
					Inner	Outer		
S01-146-109	CRA-1903X	15 L	4	1	349×349×445	432×432×559	N.O	1,727,800
S01-146-113	CRA-2310X	90 L	24	3	508×370×1537	591×457×1651	N.O,FM	3,450,400

배송비 별도



CRA-2310X

### Two Doors형

#### Manual Type

Cat. No.	Model	용량	Capacity (gal)	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
					Inner	Outer		
S01-146-121	CRA-71X	83 L	22	1	806×476×673	889×558×889	N.O,FM	2,731,900
S01-146-125	CRA-32X	113 L	30		1003×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM	2,773,500
S01-146-129	CRA-47X	170 L	45	2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM	3,612,900
S01-146-133	CRA-62X	227 L	60		781×771×1537	864×864×1651	N.O,FM	4,573,700

배송비 별도

#### Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-137	CRA-70X	83 L	1	806×476×673	889×559×889	N.O,FM	2,909,000
S01-146-141	CRA-3010X	113 L		1003×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM	3,069,200
S01-146-145	CRA-4510X	170 L	2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM	4,154,800
S01-146-149	CRA-6010X	227 L		781×771×1537	864×864×1651	N.O,FM	4,870,100

배송비 별도

#### Sliding Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-115	CRA-30X	113 L	1	1003×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM	4,083,900
S01-146-117	CRA-45X	170 L	2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM	5,619,500

배송비 별도



CRA-32X